



SUSIE® S500.200 Torso Avançado de Parto para onstetrícia

Torso avançado de parto SUSIE® S500.200 para obstetrícia

O Simulador de torso avançado de parto SUSIE® S500.200 para obstetrícia, é versátil usando elementos duráveis comprovados em anos de serviço ao redor do mundo.

CARACTERÍSTICAS



TORSO AVANÇADO de PARTO SUSIE® S500.200

Torso de parto leve disponível em tons de pele clara, média ou escura; Parto de apresentação facial ou pélvico; Parto a vácuo ou auxílio de fórceps em partos assistidos; Vulvas substituíveis e cérvices altamente distensíveis; Coberturas abdominais removíveis, transparente e opaca; Sons cardíacos audíveis da mãe de 0 a 200 bpm; Sons audíveis de coração recém-nascido de 0 a 220 bpm; Choros audíveis do recém-nascido, grunhidos e estridor; Bebê com almofada de elevação para prática de manobras de Leopold; O reto permite medicação;



BEBÊ

Duas placentas com fragmentos removíveis;
Quatro cordões umbilicais;
Dois conectores;
Dois grampos umbilicais;
Bebê recém-nascido com crânio com fontanelas;
Frequência cardíaca audível de 0 a 220 bpm;
A pele macia da face cabe sobre a cabeça para o parto a vácuo / fórceps;



BEBÊ RECÉM-NASCIDO

Pulso umbilical operado por bulbo;
Gorro para minimizar a hipotermia;
Cateterização umbilical;




PARTO COM APRESENTAÇÃO PÉLVICA

Pratique partos vaginais com apresentação pélvica, usando a manobra de Pinard.



PALPAÇÃO FETAL

Palpação do feto por meio da cobertura abdominal transparente ou opaca.

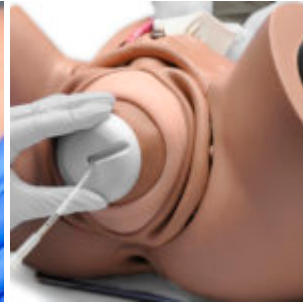

PARTO A VÁCUO

Partos com auxílio de vácuo ou fórceps com ou sem cobertura abdominal.



PARTO DA PLACENTA

Posicione a placenta para simular placenta prévia. A placenta possui fragmentos removíveis.



COLOCAÇÃO DE GRAMPOS E CORTE DO CORDÃO UMBILICAL

Inclui 4 cordões umbilicais e 2 grampos umbilicais para exercícios de colocação do grampo e corte.



SANGRAMENTO PÓS PARTO

Reservatório de sangue para simular sangramento pós-parto.



CATETERISMO

Use cateteres urinários convencionais para reduzir o tamanho da bexiga.



MASSAGEM UTERINA

A massagem uterina reduz o tamanho do útero, permitindo que o aluno sinta a diminuição do útero.



RECÉM-NASCIDO

Recém-nascido com pulso umbilical. Realiza cateterização umbilical.



SONS CARDÍACOS FETAIS

Um estetoscópio convencional ou de Pinard pode ser usado para auscultar os sons cardíacos fetais, que são ajustáveis de 0 a 220 bpm.



FREQUÊNCIA CARDÍACA, CHORO E SONS DAS VIAS AÉREAS

Selecione a frequência cardíaca da mãe ou recém-nascido, choro, grunhidos ou estridor.